


Ecare 4.3"



KAPESNÍ KAMEROVÁ LUPA
Vis-E-H6

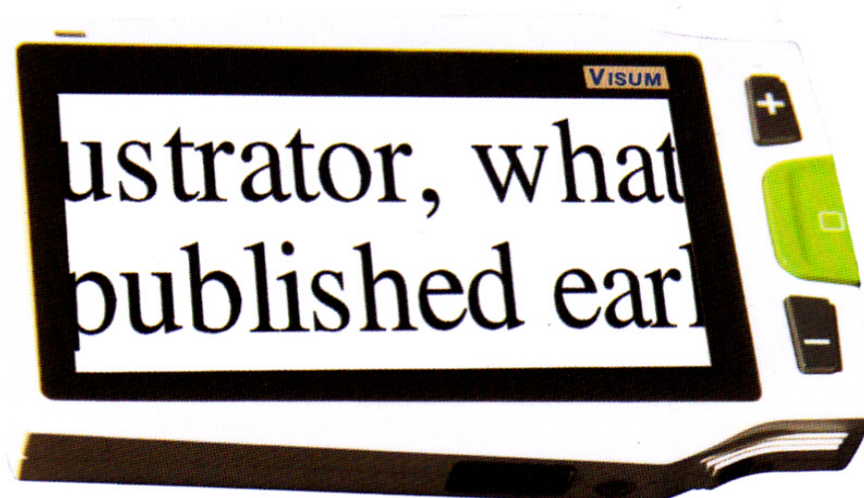

OBSAH uživatelské příručky:

Bezpečnostní pokyny a Upozornění

Obsah balení

Stojánek a rukojeť

Ovládací prvky

Použití eCare 4.3 "

1. Zapnutí, vypnutí

2. Zvětšení, zmenšení

3. Režimy zobrazení

4. Podsvícení LED

5. Funkce Pozastavení

6. Nastavení úrovně jasu

7. Psaní

8. TV výstup

Stav baterie

Technické specifikace

Záruční podmínky

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

- čtěte pozorně

Tento přístroj může být používán pouze v bezprašném, nemastném, chemicky a fyzikálně neagresivním interiéru

při teplotě -5° až 40°C a vlhkosti 20-80%.

Nesmí upadnout, ani jinak narazit.

Nepokládejte na nestabilní povrch.

Nepoužívejte přístroj, pokud najdete jakékoliv škody na síťovém kabelu, adaptéru nebo zásuvce.

Neopravujte přístroj sami.

Používejte pouze originální příslušenství.

UPOZORNĚNÍ:

Toto zařízení bylo testováno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B, podle části 15 předpisů FCC.

OBSAH BALENÍ:

- ECare 4.3 "(včetně baterie uvnitř přístroje)

- Poutko na zápěstí

- Pouzdro na přenášení

- Hadřík

- Video kabel

- A/C adaptér

- Stojánek

- Rukojeť

- Návod k obsluze

STOJÁNEK A RUKOJEŤ:

Stojánek a rukojeť jsou odnímatelné, vzájemně vyměnitelné součásti pro ideální využití lupy.

Pomocí stojánku udržuje lupa ideální odstup od předlohy.

Rukojeť lze využít pro pohyb lupou v prostoru.

OVLÁDACÍ PRVKY:

A. Zvětšení („ + “ na zařízení)

B. Barvy / Reálné zobrazení / ovládání LED podsvícení

C. Zmenšení („ - “ na zařízení)

D. Ukazatel baterie

E. (F na zařízení) Pozastavení obrazu / zpět v MENU

F. Zapnout / Vypnout



G. Vstup napájení

H. TV výstup

I. (M na zařízení) MENU nastavení

J. Objektiv fotoaparátu

K. Stojánek
L. LED podsvícení

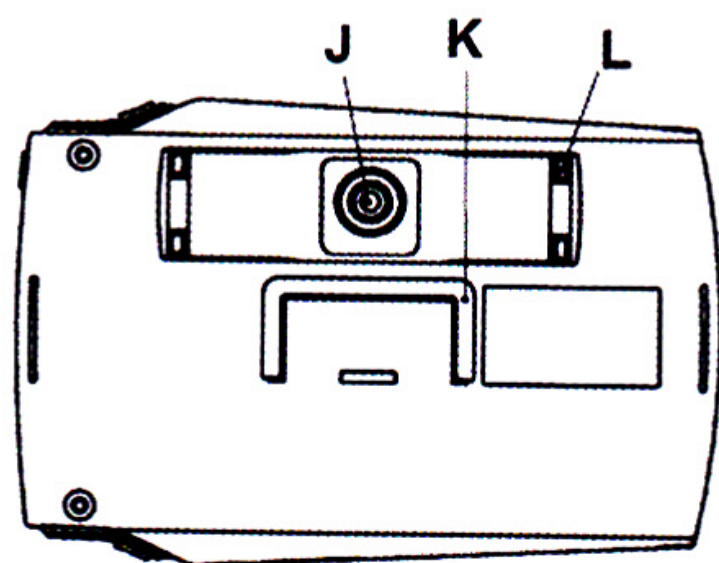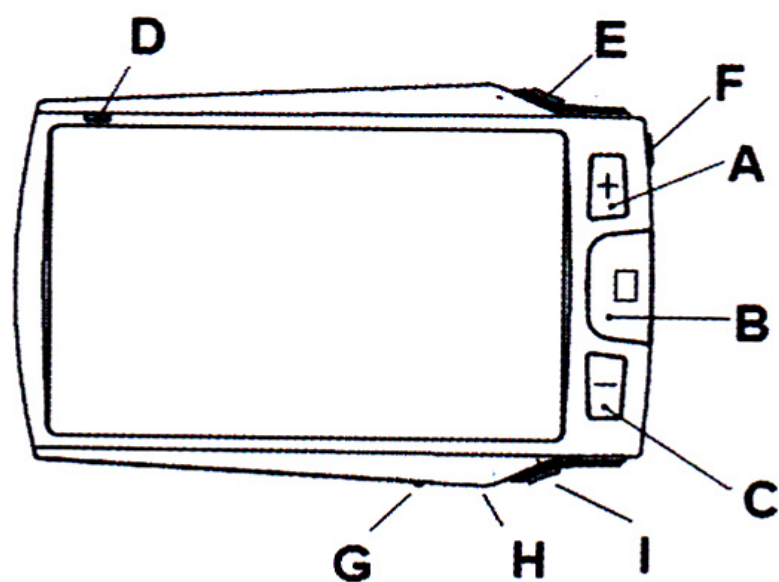

Použití ECARE 4.3 "

1.



ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ:

(tlačítko F viz nákres)

Zapnutí zařízení : stiskněte a podržte tlačítko po 3 sekundy.

Vypnutí zařízení : stiskněte a podržte tlačítko po 3 sekundy.

Zůstane-li lupa neaktivní po dobu 3 minut, automaticky se vypne.

2.



ZVĚTŠENÍ, ZMENŠENÍ:

Stiskem tlačítka „+“ postupně zvětšujete obraz předlohy až 22x

Stiskem tlačítka „-“ postupně zmenšujete obraz předlohy do 1.9x

3.



BARVA / REÁLNÉ ZOBRAZENÍ:

(tlačítko B viz nákres)

Krátkými stisky tlačítka střídáte mezi:

Reálné zobrazení, Bílá na černém, Černá na bílém, Žlutá na modrém, Žlutá na černém pozadí.

Jiné barevné kombinace:

- Černá na žluté
- Zelená na černé
- Černá na zelené
- Fialová na bílé
- Bílá na fialové
- Modrá na žluté
- Bílá na modré
- Modrá na bílé

najdete v nastavení MENU

4.



LED podsvícení:

(tlačítko B viz manuál)

dlouhým stiskem rozsvítíte a vypínáte

5.

MENU nastavení:

(tlačítko I viz nákres)

- Dlouhým stiskem M do MENU, krátkým stiskem M do zvýrazněné volby, krátkým stiskem F zpět v MENU, pohyb v MENU „ + “ „ - “.
- Odchod z MENU dlouho M

6.




POZASTEVNÍ obrazu:

(tlačítko E viz nákres)

Krátkým stiskem pozastavíte obraz, uvolnění obrazu opět krátkým stiskem.

Uložení snímku dlouhým stiskem z pozice Pozastaveno.

Zařízení může uložit až 10 snímků.

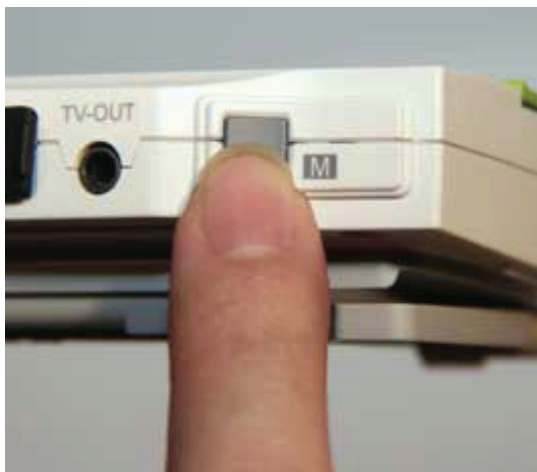

Pro PŘÍSTUP K ULOŽENÝM obrazům:

(tlačítko I viz náčrt)

Dlouze stisknete tlačítko M,

tlačítka „+“ nebo „-“ nalistujete „Zobrazit uložené“ a krátce stisknete tlačítko M, v obrazech listujete tlačítka „+“ nebo „-“.

Pro otevření obrazu krátce stisknete M.

Pokud je zobrazen obraz a zamknut krátkým stiskem M „Zámek“,

lze měnit tlačítka „+“ nebo „-“ jeho úroveň zvětšení.

Zpět z uzamčení krátce stisknete M.

7.

NASTAVENÍ JASU:

(tlačítko I viz náčrt)

Dlouze stisknete tlačítko M,

tlačítka „+“ nebo „-“ nalistujete „Nastavení jasu“ a krátce stisknete tlačítko M, jas tlumíte nebo zesvětlujete tlačítka „+“ nebo „-“.

Pro potvrzení dvakrát za sebou krátce stisknete M,

Na předchozí pozici se vrátíte stiskem tlačítka F nebo M.

Nastavené hodnoty zůstanou uloženy i po vypnutí a opětném zapnutí přístroje.

8.

Zařízení lze využít i pro potřebu kontroly vlastnoručního psaní.

9.

TV výstup

Umožňuje propojení zařízení kabelem k televizní obrazovce, a využít velikost obrazovky jako zobrazovacího zařízení.

STAV BATERIE

Indikátor baterie je umístěn v pravém horním rohu zařízení.

(tlačítko D viz náčrt)

- blikající červeně: zařízení je třeba nabít
- svítící červeně: baterie se nabíjí
- nesvítí: baterie je nabitá

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Zvětšení rozsahu	1.9 až 22x nebo 44x
LCD displej	4,3 "TFT LCD
Kontinuální Zvětšení	Ano
Zobrazení Režimy	8
Image Freeze funkce	Ano
Nastavení jasu Funkce	Ano
LED osvětlení On / Off	Ano
Key Tone On / Off	Ano
TV OUT funkce	Ano
Odnímatelná rukojeť	Ano
Detachable Reading Stand	Ano
Nepřetržitý pracovní době	4 hodiny
hmotnost	174 g
Rozměry	130 x 88 x 33 mm

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- čtěte pozorně

Na produkt je poskytována záruka 2 roky počínaje datem zakoupení.

Záruka se vztahuje na materiály a zpracování.

Aby bylo možné využít záruku, je třeba uchovat obalové materiály z důvodu bezpečné přepravy.

Záruční služby jsou poskytovány SYMBIO, o. p. s.

Není-li možné přístroj opravit, vyhrazuje si SYMBIO, o. p. s. právo nahradit jej jiným přístrojem se stejným zařízením.

Všechny komponenty a produkty nahrazeny v záruční době se stávají majetkem SYMBIO, o. p. s.

Nárok na záruku zaniká v případě, že:

přístroj nebyl použit v souladu s pokyny uživatelské příručky nebo byl jinak zneužit

přístroj byl poškozen v důsledku pádu nebo nárazu

přístroj byl sestavován jinak než je uvedeno v uživatelské příručce

přístroj byl opravován jinak nebo někým jiným než servisním partnerem SYMBIO, o. p. s.

Případná ztráta přístroje nebo poškození třetími stranami či živelnými pohromami:

Dodavatel nenese žádnou zodpovědnost za případnou ztrátu nebo odcizení přístroje.

Dodavatel nenese žádnou zodpovědnost za poškození přístroje jinou osobou vyjímaje osobou zastupující dodavatele.

Dodavatel nenese žádnou zodpovědnost za poškození přístroje živelnými pohromami ani nadpřirozenými jevy.

Dodavatel nepřebírá žádnou odpovědnost ani nepřijímá žádnou možnost odpovědnosti, s výjimkou ustanovení výslovně uvedených výše v podmínkách záruky. Toto omezení odpovědnosti neznamena porušení zákonných práv zákazníka spotřebitele nebo jeho práv vůči prodávajícímu.

Servisní plnění

Předtím, než se obrátíte na vašeho prodejce před uplatněním záruky nebo služby, je třeba poznamenat, název produktu, sériové číslo, datum nákupu, číslo faktury, znění chybové zprávy či konkrétní problémové aspekty. Velmi doporučujeme přepravovat zařízení v originální krabici, neboť v případě poškození při přepravě, nemůže být uznána záruka.

Servisním místem v ČR je SYMBIO, o. p. s. na adrese Jana Růžičky 1165, Praha 4, tel. 739 094 745