


**Ecare 3.5“**



**KAPESNÍ KAMEROVÁ LUPA**

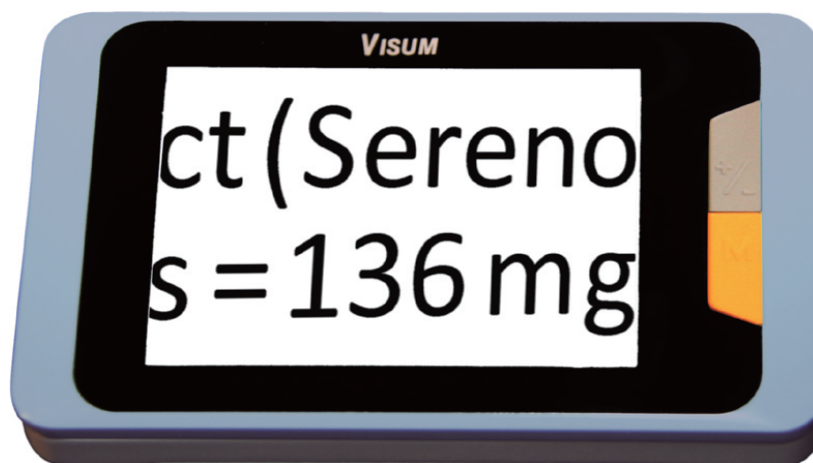

#### OBSAH:

Bezpečnostní pokyny a upozornění

Obsah balení a ovládací prvky

Použití eCare 3,5 "

1. Zapnutí, vypnutí
2. Zvětšení, zmenšení
3. Režimy zobrazení
4. Funkce Pozastavení
5. Nastavení úrovně jasu
6. Podsvícení LED
7. Ozvučení tlačítek

Paměť uložení nastavených funkcí

TV výstup

Způsob psaní

Stav baterie

Technické specifikace

Záruční podmínky

#### BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

- čtěte pozorně

Tento přístroj může být používán pouze v bezprašném, nemastném, chemicky a fyzikálně neagresivním interiéru při teplotě -5° až 40°C a vlhkosti 20-80%.

Nesmí upadnout, ani jinak narazit.

Nepokládejte na nestabilní povrch.

Nepoužívejte přístroj, pokud najdete jakékoliv škody na síťovém kabelu, adaptéru nebo zásuvce.

Neopravujte přístroj sami.

Používejte pouze originální příslušenství.

#### UPOZORNĚNÍ:



Toto zařízení bylo testováno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B, podle části 15 předpisů FCC.

#### OBSAH BALENÍ:

- ECare 3.5 "(včetně baterie uvnitř přístroje)
- Poutko na zápěstí
- Pouzdro na přenášení
- Hadřík
- Video kabel
- A / C adaptér
- Návod k obsluze


# OVLÁDACÍ PRVKY:

- A. zvětšení +/-
- B. (M na zařízení) menu
- C. zapnout / vypnout
- D. pozastavení obrazu, jas
- E. ukazatel baterie
- F. vstup napájení
- G. TV výstup
- H. objektiv fotoaparátu
- I. stojánek

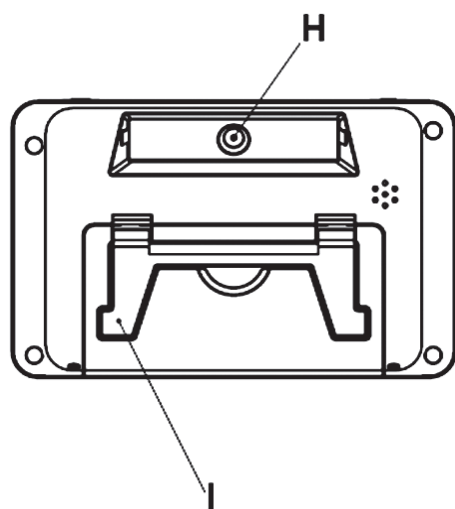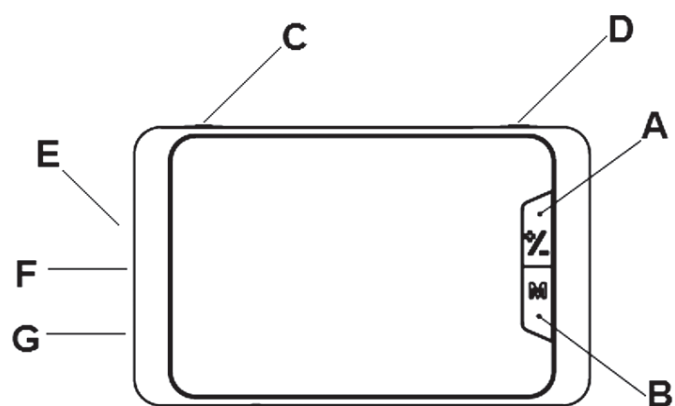

## POUŽITÍ :

1.

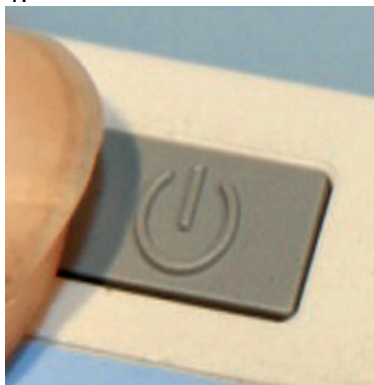

(tlačítko C viz nákres)

### ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ:

Zapnutí zařízení : stiskněte a podržte tlačítko po 2 sekundy.

Vypnutí zařízení : stiskněte a podržte tlačítko po 2 sekundy.

Zůstane-li lupa neaktivní po dobu 3 minut, automaticky se vypne.

2.



(tlačítko A viz nákres)

### ZVĚTŠENÍ, ZMENŠENÍ:

Stiskem tlačítka „+“ postupně zvětšujete obraz předlohy až 17x

Stiskem tlačítka „-“ postupně zmenšujete obraz předlohy do 2.5x

3.



(tlačítko M na zařízení, B viz nákres)

### BARVA / REÁLNÉ ZOBRAZENÍ:

Krátkými stisky tlačítka střídáte mezi:

Reálné zobrazení, šedé, černá na bílém, bílá na černém,

bílá na modrém, černá na žlutém, modrá na žlutém, žlutá na modrém,

4.



(tlačítko D viz nákres)

#### POZASTAVENÍ OBRAZU

Krátkým stiskem pozastavíte obraz, uvolnění obrazu opět krátkým stiskem.

5.



(tlačítko D viz nákres)

#### NASTAVENÍ ÚROVNĚ JASU

Stiskem tlačítka po dobu 3 sekund jste v nabídce jasu, následně krátkými stisky vybíráte mezi čtyřmi možnostmi jasu.

Pro opuštění nabídky opět stisknete po dobu 3 sekund

Poznámka: pokud jste v nabídce Jasu, ostatní tlačítka jsou nefunkční.

6.



(tlačítko A viz nákres)

#### PODSVÍCENÍ LED

Stiskem tlačítka, ve výchozím nastavení, po dobu 3 sekund zhasnete nebo zapnete podsvícení.

7.



(tlačítko M na zařízení, B viz nákres)

#### OZVUČENÍ TLAČÍTEK

Stiskem tlačítka po dobu 3 sekund zapnete nebo vypnete ozvučení tlačítek.

Paměť uložení nastavených funkcí

Nastavené hodnoty (velikost zobrazení, jas, reálný nebo barevný režim, zvuk) zůstanou uloženy i po vypnutí a opětném zapnutí přístroje.

TV výstup

Umožňuje připojit zařízení v TV obrazovce.



Zařízení může být použito i pro snadnější psaní, viz obrázek výše.

Indikátor baterie zařízení (tlačítko E viz nákres)

- blikající červené světlo: baterie je potřeba nabít
- svítící červené světlo: baterie je právě nabíjena
- nesvítí: baterie je plně nabita

#### TECHNICKÉ SPECIFIKACE

zvětšení rozsahu.....	2,5 až 17x
LCD obrazovky.....	3,5 "TFT LCD
zvětšení .....	4x
barevné zobrazení.....	8 režimů
pozastavené obrazu.....	ano
nastavitelný jas.....	ano
LED On / Off.....	ano
zvuk On / Off.....	ano
TV výstup.....	ano
vestavěný skládací stojánek.....	ano
nepřetržitý pracovní doba.....	4 hodiny
hmotnost.....	140g
rozměry.....	118 x 74 x 19 mm

#### ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

##### - čtěte pozorně

Na produkt je poskytována záruka 2 roky počínaje datem zakoupení.

Záruka se vztahuje na materiály a zpracování.

Aby bylo možné využít záruku, je třeba uchovat obalové materiály z důvodu bezpečné přepravy.

Záruční služby jsou poskytovány SYMBIO, o. p. s.

Není-li možné přístroj opravit, vyhrazuje si SYMBIO, o. p. s. právo nahradit jej jiným přístrojem se stejným zařízením.

Všechny komponenty a produkty nahrazeny v záruční době se stávají majetkem SYMBIO, o. p. s.

##### Nárok na záruku zaniká v případě, že:

přístroj nebyl použit v souladu s pokyny uživatelské příručky nebo byl jinak zneužit

přístroj byl poškozen v důsledku pádu nebo nárazu

přístroj byl sestavován jinak než je uvedeno v uživatelské příručce

přístroj byl opravován jinak nebo někým jiným než servisním partnerem SYMBIO, o. p. s.

##### Případná ztráta přístroje nebo poškození třetími stranami či živelnými pohromami:

Dodavatel nenesе žádnou zodpovědnost za případnou ztrátu nebo odcizení přístroje.

Dodavatel nenesе žádnou zodpovědnost za poškození přístroje jinou osobou vyjímaje osobou zastupující dodavatele.

Dodavatel nenesе žádnou zodpovědnost za poškození přístroje živelnými pohromami ani nadpřirozenými jevy.

Dodavatel nepřebírá žádnou odpovědnost ani nepřijímá žádnou možnost odpovědnosti, s výjimkou ustanovení výslovně uvedených výše v podmínkách záruky. Toto omezení odpovědnosti neznamená porušení zákonných práv zákazníka spotřebitele nebo jeho práv vůči prodávajícímu.

##### Servisní plnění

Předtím, než se obrátíte na vašeho prodejce před uplatněním záruky nebo služby, je třeba poznamenat, název produktu, sériové číslo, datum nákupu, číslo faktury, znění chybové zprávy či konkrétní problémové aspekty. Velmi doporučujeme přepravovat zařízení v originální krabici, neboť v případě poškození při přepravě, nemůže být uznána záruka.

Servisním místem v ČR je

**SYMBIO, o. p. s. na adrese Jana Růžičky 1165, Praha 4, tel. 739 094 745**